

**Ligne de lasers  
Doctor Smile**



**Wiser:**  
la 3<sup>e</sup> génération de  
laser dentaire



**D30:**  
le laser  
multifonctionnel  
dentaire + derme



**Pluser:**  
laser tous tissus,  
dermo-esthétique

**doctor smile<sup>®</sup>**  
dental laser



**Formations & support  
marketing**

**Doctor Smile** organise des manifestations au cours desquelles les médecins et les chefs d'équipe sont correctement formés à l'utilisation du laser. Ces manifestations comprennent une formation théorique et clinique, des sessions pratiques ainsi que la remise du diplôme "Educational Laser Certificate". La commercialisation de vos produits dentaires a été optimisée grâce au matériel marketing conçu et imprimé de façon professionnelle, élaboré pour booster vos ventes comme jamais.



**Détails  
techniques**

Nom du modèle & code	Doctor Smile Simpler LA7D0001.3
Longueur d'onde	980 nm
Puissance de sortie	8 W
Intervalle des impulsions	de 10 µs à CW
Fréquence	jusqu'à 25 kHz
Dimensions	20x15x12 cm WxHxD
Poids	1,5 kg
Classe médicale/laser	II B / 4



Tous les lasers médicaux LAMBDA S.p.A. sont certifiés marque CE conformément aux directives CEE relatives aux dispositifs médicaux : directives CEE 93/42

dealer



**Un producteur  
à vos côtés**

La ligne Doctor Smile est produite par LAMBDA SpA – Italie, l'une des compagnies leaders au niveau mondial dans le secteur du laser dentaire qui mène des recherches, développe, fabrique et commercialise une technologie laser médicale et dentaire. Le siège social LAMBDA, avec ses 5 000 m<sup>2</sup> de locaux, offre une grande salle de démonstration ainsi qu'un espace de conférence multimédia, avec une zone consacrée aux cours pratiques et théoriques de la formation au laser. Un nouveau site de production moderne doté de bureaux, parfaitement adapté à notre objectif : servir nos chers clients mieux que jamais !

**LAMBDA SpA**

Via dell'Impresa, 1  
36040 BRENDOLO (VI)

Italy

T. +39 0444.349165  
F. +39 0444.349954  
info@lambdaspa.com  
www.lambdaspa.com



**Stimulez votre activité!**

**doctor smile<sup>®</sup>**  
dental laser

simplerlaser.com




LWS whitening  
TITANIUM LASER SYSTEM

### SÉLECTION DIRECTE DE PROTOCOLE



### INFORMATIONS DE PROCÉDURE

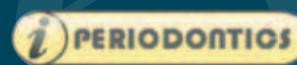

### SYSTÈME DE MISE À NIVEAU PERMANENT



### TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN



#### Configuration T.O.P.

Comparé aux autres systèmes disponibles sur le marché, SIMPLER se distingue sans aucun doute par sa grande simplicité d'utilisation. Un bouton spécifique pour chaque type de soin, accompagné de paramètres pertinents et reconnus scientifiquement pour chaque opération, offre à l'opérateur un démarrage rapide et immédiat dans plusieurs domaines : ENDODONTIE, PARODONTIE, CHIRURGIE, THÉRAPIE, IMPLANTOLOGIE et BLANCHIMENT. En chirurgie, grâce à la configuration Tissue Optimized Pulsing (T.O.P.), le médecin peut facilement contrôler le faisceau laser SIMPLER selon les trois biotypes de tissu mou : fibreux, normal et de granulation. La configuration T.O.P. optimise la taille et la coagulation et favorise une cicatrisation non hémorragique, plus rapide et indolore. Le laser SIMPLER est l'outil indispensable pour les activités quotidiennes d'un cabinet dentaire.



#### NaWiGo™ navigation intégrée

SIMPLER offre un monde d'opportunités et NaWiGo™ la garantie d'une meilleure médecine dentaire ! Grâce à NaWiGo™, une connexion web personnalisée, SIMPLER est doté de caractéristiques innovantes visant à simplifier la médecine dentaire pour les utilisateurs débutants et à optimiser la pratique des plus expérimentés. Une liste complète de PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS DE SOIN ainsi que le GUIDE DE NAVIGATION accompagneront le médecin dans l'exécution d'un grand nombre d'opérations, dans toutes les typologies de tissu, et ce avec la plus grande efficacité. Ce système améliorera l'aptitude du clinicien à effectuer les procédures courantes plus rapidement et plus efficacement. Une étape supplémentaire pour augmenter le confort du dentiste ainsi que celui du patient, améliorer facilement les méthodes



#### Mise à niveau code système

Le laser SIMPLER peut être directement mis à niveau par l'utilisateur, en quelques étapes. A chaque fois que cela est nécessaire, le logiciel peut évoluer de la version EASY à une version supérieure plus détaillée : le mode avancé ADV+. Le mode EASY offre un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées. La version avancée propose une régulation plus détaillée du logiciel aux utilisateurs qui souhaitent personnaliser les opérations, modifier les valeurs et les impulsions. De plus, à partir de cette modalité et grâce à NaWiGo™, il est possible de pénétrer dans un monde exceptionnel de nouveaux programmes, d'opportunités et de domaines de traitement élargis. Elle permet aux utilisateurs de parcourir et de télécharger des applications depuis le site web de la société.

#### Un grand nombre d'accessoires

SIMPLER est équipé d'une large gamme d'accessoires : des pièces à main et embouts spécifiques prévus pour le traitement chirurgical à ceux ergonomiques spécialement conçus pour la biostimulation. Des embouts à usage unique et autoclavables conçus pour différentes opérations sont fournis. Conçus pour des opérations de blanchiment, la pièce à main à usage unique et les arcs destinés aux zones plus étendues peuvent être combinés au gel de blanchiment Doctor Smile LWS. Un traitement cosmétique rapide et efficace, pour un rendement rapide de l'investissement. Grâce à sa grande capacité d'adaptation, le laser Simpler peut être associé à une pièce à main universelle pour des applications multidisciplinaires.



**Demandez votre CD clinique gratuit sur [www.doctor-smile.com](http://www.doctor-smile.com)**